

Blutplasma-Einfriergerät PF18-Turbo/S7

-50°C

- * Kontaktplatten-Freezer für 18 Plasmen*
- * Kerntemperatur von -30°C innerhalb von 30 min**
- * Deckel mit pneumatisch gesteuertem Hub
- * gleichmäßig geformte, bis zum Kern gefrorene Plasmen
- * Schnellabtauung nach Bedarf
- * Siemens S7-1200 inklusive Touch-Panel 5,7" Color
- * Zustandsanzeigen und Gefrierprozess im Display ablesbar
- * Kälteaggregat luft- oder wassergekühlt
- * Warn- und Störmeldungen werden angezeigt
- * Schnittstelle RS485

Außenflächen: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, hygienisch, pflegeleicht

Innenausstattung: Kontaktkälteplatten aus extrem wärmeleitfähigen Kupferplatten, vernickelt

Fassungsvermögen:
*18 Plasmen 400ml oder 12 Plasmen 800 ml

Einfriergeschwindigkeit:
innerhalb von 30 Minuten** auf eine Kerntemperatur kälter -30°C.
** abhängig von Füllmenge und Beutelhersteller

Isolierung 70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material.

Deckel: mit pneumatisch gesteuertem Hub, Deckeldichtung wechselbar

Kältemaschine: luftgekühlt oder wassergekühlt, halbhermetisch, erschütterungsfrei gelagert, sehr leise, energiesparend und servicefreundlich.


Kälteplatten: Direktverdampfung mit umweltfreundlichen FCKW-freien Kältemittel, ein spezielles Kanalsystem sorgt überall für gleiche Temperaturen auf den Kälteplatten.

Schnellabtauung durch Prozessumkehrung des Kältekreislaufes mit thermischer Überwachung und Zeitbegrenzung

Elektronische Regelung: Bis zu einer Umgebungstemperatur von 32°C wird die Temperatur auf den Kälteplatten automatisch gehalten. Auch unabhängig von wechselnden Umgebungstemperaturen. Alle Temperaturen und Zeiten werden digital angezeigt.

Warneinrichtung Warn- und Störmeldungen werden im Display angezeigt. Bei Störung automatisches Anheben des Deckels und Freigabe der Plasmen.

Sicherheit: nur Zweihandbedienung bei Deckelschließung möglich.
Notauf-Taster: frontseitig zentral

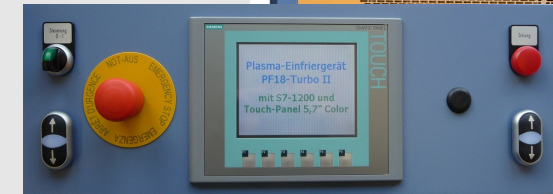

Einfriertemperatur	-50°C
Fassungsvermögen maximal	18 Plasmen*
Anschluss	400V / 3Ph
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	4200 Watt
Kälteleistung bei -50°C	1200 Watt
Außenmaße in mm (B/T/H)	1300/890/1350

Einrichtungen gegen Mehrpreis:

Temperaturdokumentation:

- **Dummysensor** für Kerntemperaturmessung, inklusive Werkszertifikat
- **Bildschirmschreiber LOGOSCREEN** im Tragegehäuse, inklusive Flash-Card und Protokollsoftware PCA 3000
- **FreezeMon** Protokollierungs- und Auswertesoftware inkl. Hardware (Rechner, Bildschirm, Barcode-Scanner, Tastatur, Maus)